


Model. BKHM-2320FG/BKHM-2320FR

보국마사지 바디해머 사용설명서

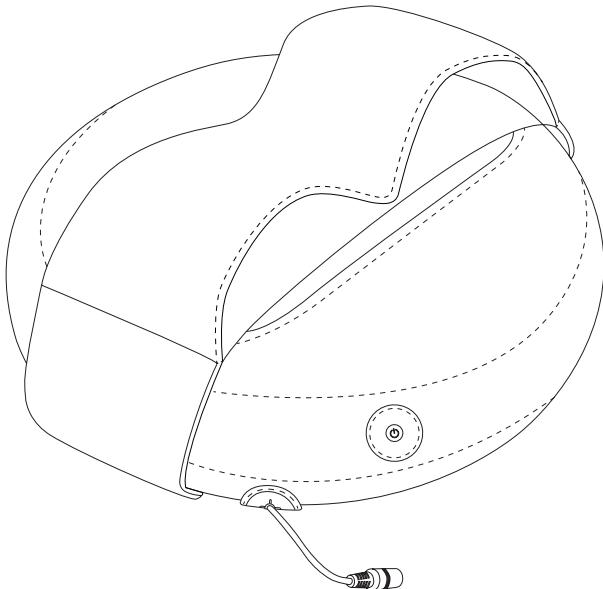

주의사항

- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다

bokuk

안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.

!경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

!경고

1. 전원코드 부분을 잡아당겨서 빼거나, 젖은 손으로 전원플러그나 코드를 만지지 마십시오
2. 제품 사용시 콘센트를 단독으로 사용하십시오
3. 상품구성에 포함된 전용 어댑터만 사용하십시오
4. 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하십시오
5. 헐거운 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마십시오
6. 작동 중 전원플러그를 빼거나 이동하지 마십시오
7. 전원플러그가 파손되었을 경우 사용하지 마시고 반드시 당사 서비스센터를 통해 점검 후 사용하십시오
8. 천등, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 뽑아 주십시오
9. 제품의 스위치가 꺼져 있더라도 근처에 물이 있는 경우 코드를 뽑아주십시오
10. 제품 주변에 인화성 물질을 두지 마십시오
11. 온도가 높은 화기근처 또는 타기 쉬운 물질로부터 사방 1m 이상 거리를 두고 설치하십시오
12. 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마십시오
13. 제품 동작 중에는 가능한 한 스트랩을 열지 마십시오 스트랩으로 인해 발이 불편할 경우 전원을 멈춘 후 다시 스트랩을 조정해 주세요
14. 본 제품을 정해진 용도 이외에는 사용하지 마십시오
15. 청소시에는 반드시 전원코드를 빼고 손질해 주십시오
16. 제품을 임의로 개조, 교체하지 마십시오
17. 제품위에 무거운 물건을 올려놓거나 심한 충격을 가하지 마십시오
18. 본 제품은 유아, 어린이, 노약자, 신체적/정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독 할 수 있는 보호자의 지도하에 사용해 주십시오
19. 본 제품은 온열기능이 있는 장치로, 열에 둔감하거나 피부가 예민한 사람들은 기기의 사용 시 조심하여야 합니다
20. 제품 사용 중 조금이라도 불편함을 느끼는 경우 즉시 사용을 중지하십시오

※주의

1. 사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다
2. 분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마십시오
3. 온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마십시오
4. 제품에 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하고 가까운 대리점이나 A/S 센터로 문의하여 주십시오
5. 작동 중 제품을 이동하지 마십시오
6. 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오
7. 실외 및 직사광선이 닿는 장소에서 사용하지 마십시오
8. 사용 중에는 전원플러그를 뽑지 마십시오
9. 다음 장소에서는 사용하지 마십시오
(가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳
비가 들이치거나 습기가 높은 곳)


안전을 위한 주의사항

※주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

※주의


10. 오랜 시간 사용한 제품은 점검 후 사용하시기 바랍니다
11. 폐가전 제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하십시오
12. 유지 보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단해야 합니다
13. 음주 후, 심리적으로 불안정한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오
14. 15분을 초과한 사용은 신체에 무리를 줄 수 있으니 충분한 휴식 후 사용하십시오
15. 동작이 멈추지 않은 상태에서 일어서거나 전원을 강제 차단하지 마십시오
(제품 고장의 원인이 됩니다)
16. 다음 사항에 해당되거나 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 먼저 의사와 상담한 후 사용해 주십시오
 - A 임신 중이거나 몸 상태가 좋지 않거나 신체에 변형이 있는 경우
 - B 다리, 발 부위에 통증을 느끼는 경우
 - C 폐이스 메이커, 제세동기 등 전자파 영향을 받기 쉬운 개인 의료장비를 사용하고 있는 경우
 - D 심장 장애가 있는 경우
 - E 혈전증, 동맥류, 긍성 정맥류 또는 기타 순환기 질환으로 인해 의사가 마사지를 금지한 경우
 - F 타박상, 염증 등의 외상이 있는 경우
 - G 뇌출증, 고혈압, 저혈압 환자 등 기저질환자
 - H 치과 치료중인 자
 - I 이 외 신체 상태가 물리적인 자극으로 쉽게 영향을 받거나 악화될 가능성이 있는 자
17. 마사지시 맨 살이 기기에 직접 닿지 않도록 하십시오 피부가 기기에 직접 닿게 되면 피부에 자극이 갈 수 있으며, 얇은옷이나 양말을 착용하면 더욱 효과적으로 마사지 할 수 있습니다
18. 한번에 20분 이상 마사지하지 마십시오 제품을 처음 사용할 때에는 근육에 무리가 가지 않도록 사용하고, 사용에 익숙해지면 점차 마사지 시간을 연장하거나 강도를 높여주세요
19. 아이들이 가지고 놀거나 기기를 조작하지 못하도록 하십시오 기기에 아이들의 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오
20. 본 제품은 실내 안전한 장소에서만 사용해 주십시오
21. 버튼을 짧은 간격으로 반복하여 조작하지 마십시오 급격한 반복 조작은 고장의 원인이 됩니다
22. 물이 젖은 상태로 마사지기를 사용하지 마십시오
23. 작동 중에는 일어서거나 이동하지 마십시오
24. 본 제품은 종아리, 허벅지, 허리, 발바닥 등 신체부위를 마사지하는 제품입니다
단, 마사지 외 다른 용도로 사용하지는 마십시오
25. 사용 중 작은 불편함이라도 느끼는 경우 즉시 사용을 중지하십시오
26. 본 제품은 자동으로 사용시간(15분)이 설정되어 있어, 설정시간 이후에는 자동으로 종료됩니다
27. 사용 전 마사지 부위의 모든 방해 요소를 제거한 후 사용하십시오
(발찌 및 장신구 또는 피스나 마사지 크림)
28. 사용 중지시에는 반드시 제품의 전원 버튼을 눌러 중지한 후 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑으십시오

제품 사양 및 각 부 명칭

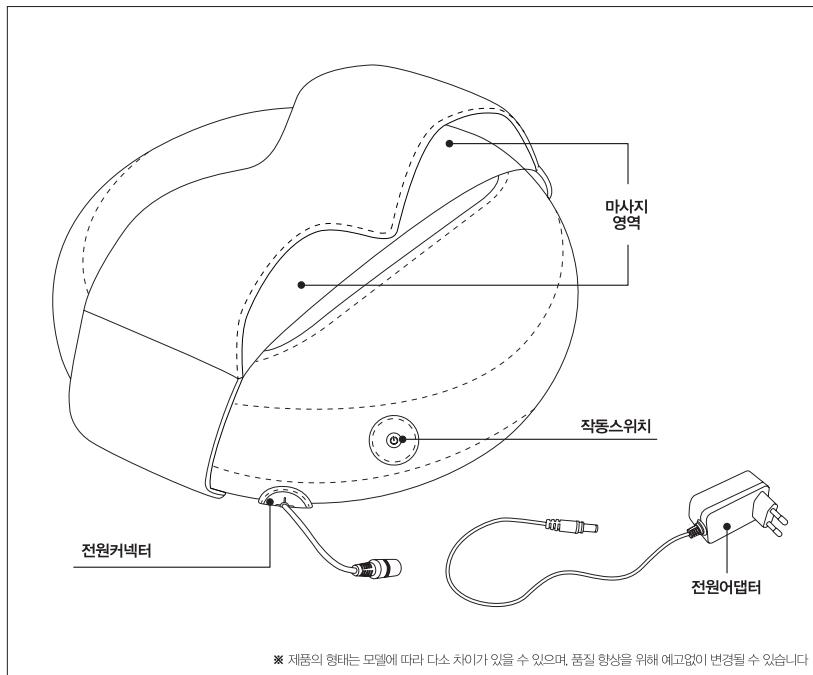

모델명	BKHM-2320FG/BKHM-2320FR	외형치수	330X330X130(mm)
정격전압	12Vdc, 2.0A	소비전력	24W
중량	본체 : 약 1.9kg / 어댑터 : 약 0.15kg	작동시간	15분(1회)

조절부 및 표시부

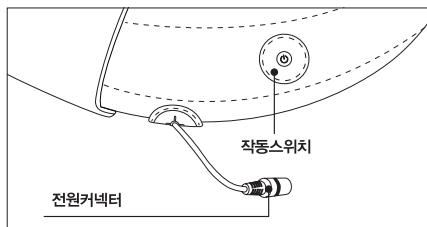

작동스위치를 누르면 3가지 마사지 모드의 설정이 가능합니다

제 품 사 용 방 법


- 전원 어댑터를 콘센트에 꽂아주세요 제품이 대기 상태가 됩니다
- 소파나 의자 또는 바닥에 편하게 앉은 후 마사지를 원하는 신체부위에 제품을 위치시켜 주세요
- 발바닥 마사지의 경우 본체에 스트랩을 부착한 후, 발 사이즈에 맞게 스트랩을 조정해 주세요
- 작동 스위치를 눌러 마사지를 시작합니다
- 작동 스위치를 반복적으로 누르면 모드의 변경 및 제품의 전원을 끌 수 있습니다
- 작동 스위치를 반복해서 누를 때마다 모드1 – 모드2 – 모드3 – 에 순서로 반복 설정됩니다

모드1	모드2	모드3
온열+역방향 롤링+두드림(1분 지속) 온열+정방향 롤링(1분 지속) * 위 싸이클 15분간 반복 진행	온열+정방향 롤링 (15분간 지속)	정방향 롤링 (15분간 지속)

※대기상태에서 작동 스위치를 누르면 모드 1로 작동합니다

※본 제품은 자동으로 사용시간 (15분)이 설정되어 있어, 설정시간 이후에는 자동으로 종료됩니다

재 사용을 위해서는 작동 스위치를 눌러 다시 사용하시기 바랍니다

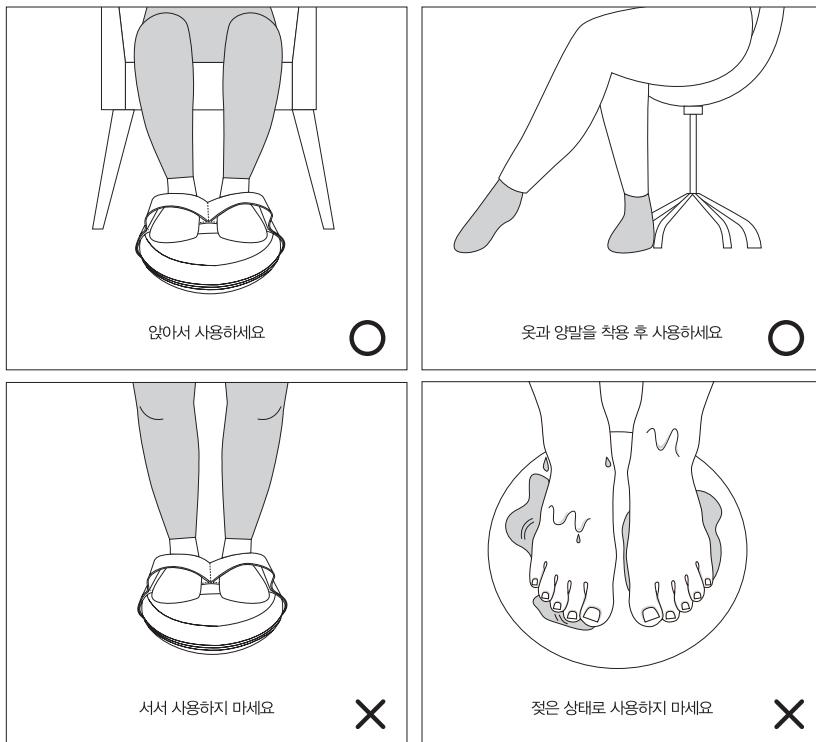

청소 및 보관방법

- 청소 및 손질시에는 반드시 전원 플러그를 뺀 후 제품의 열을 식힌 후 청소하여 주세요
 - 본체를 부드러운 도구를 사용하여 먼지 혹은 이물질 등을 털어주세요
 - 물기를 충분히 짜낸 젖은 수건으로 본체를 깨끗이 닦아주세요
 - 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조 후 사용해 주세요
- ※ 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 인화/폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요
- ※ 청소 시 제품 분해는 절대로 하지 마세요
- ※ 제품을 장기간 사용하지 않을 시 건조하고 통풍이 잘되는 곳에서 보관하여 주세요

고장신고전 확인사항

* 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실(1588-8775)로 문의 하십시오

증상	확인	조치
제품이 동작하지 않습니다	어댑터가 콘센트에 잘 꽂혀 있나요? 어댑터의 출력이 제품의 전원 커넥터와 연결되어 있나요? 제품을 연속적으로 계속 사용하였나요?	어댑터를 콘센트에 꽂아 주세요 어댑터를 제품의 전원 커넥터와 연결해 주세요 전원 어댑터를 분리하고 10분정도 냉각 후 재 사용해 주세요
사용 중 작동이 멈춥니다	작동시간(15분)이 끝났나요?	작동스위치를 눌러 다시 사용해 주세요
제품이 뜨겁습니다	제품을 연속적으로 계속 사용하였나요?	전원 어댑터를 분리하고 10분정도 냉각 후 재 사용해 주세요
커버에서 냄새가 납니다	제품을 청소하지 않고 계속 사용 하였나요?	전원코드를 분리하고 세척 후 사용해주세요

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다 / 해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 6년입니다
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다

제품명	보국 마사지 바디해머	모델명	BKHM-2320FG/BKHM-2320FR		
판매일	년 월 일	품질보증기간	1년	부품보유기간	6년
고객성명		전화	주소		
대리점 상호		전화	주소		

* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다
구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질 보증 기간을 계산합니다
- 가정용 제품은 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다
- 이 보증서는 재발행 되지 않습니다

소비자 피해보상 안내

정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간내)	소비자 피해유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
수리기능	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입기 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환불	-
	하자 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입기 환불	장액(기상각한 주여금액에 구입기의 5%를 기준하여 환불)
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자 고의과실에 의한 성능 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	-
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
	수리가 가능한 경우		
· 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 · 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우		
	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환		별도 정하는 당사 기준에 준함

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 보상 규정에 따릅니다 * 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오



전화접수

A/S 및 제품문의
1588-8775

제품문의시간
월~금(09:00~18:00)
단, 공휴일 제외



인터넷 문의

홈페이지
www.bokuk.com

당사 홈페이지의 상담문의에 문의사항을
요청하시거나 이메일로 연락주시면 A/S
담당자가 내용을 확인 후 답변을 드립니다



카카오톡 문의

모바일 카카오톡
보국전자 서비스 센터

보국전자 서비스 센터 검색 후 문의
https://p.kakao.com/_bwxgKK

* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 추후 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

bokuk
SERVICE CENTER

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서대로 57 (주)보국전자 서비스센터

